

Departamentos aplicables para la CNFA



UCI respiratoria
Oxigenoterapia precisa, apoyo después de la extracción del ventilador invasivo (insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia, neumonía intersticial, enfermedad pulmonar restrictiva)



Departamento de Pediatría
Soporte respiratorio para bronquitis y neumonía



Neurocirugía
Manejo de las vías respiratorias de pacientes con traqueotomía



Cirugía cardíaca
Soporte respiratorio para la insuficiencia cardíaca, soporte respiratorio después de la cirugía cardíaca



Departamento de Quemaduras
Protección de las vías respiratorias para quemaduras de las vías respiratorias



Pacientes tumorales
Prevención y tratamiento de quemaduras de las vías respiratorias y estomatitis después de la radioterapia y la quimioterapia



Departamento Respiratorio
Oxigenoterapia precisa, EPOC aguda, soporte respiratorio durante la broncoscopia



E.D
Inhalación de oxígeno de alta concentración, manejo de las vías respiratorias, inhalación de oxígeno para la traqueotomía



UCI quirúrgica
Después de la extracción del ventilador invasivo, manejo de las vías respiratorias para pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria



Departamento de Otorrinolaringología
Soporte respiratorio durante y después de la cirugía nasofaríngea



Obstetricia
Soporte respiratorio de oxígeno a alta temperatura, reduce el consumo de temperatura



HT Series Respiratory High-Flow Therapy Device

Dispositivo de Terapia Respiratoria de Alto Flujo Series HT

More Than Humidification



Solo para comunicación técnica

BMC Medical Co., Ltd.
Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-10-5166 3880 Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810
en.bmc-medical.com



HT Series Respiratory
High-Flow Therapy Device

ISO 80601-2-90

Publicado por ISO & IEC

20+ Desde 2001

BMC Medical Co., Ltd. (BMC)
Proporcionar a las familias
globales un servicio integrado para
los trastornos respiratorios del
sueño (SDB) y otras enfermedades
respiratorias crónicas

1 MILLÓN +

Atendemos a más de 1 millón de
pacientes y familias en todo el
mundo

100 +

Los productos cubren más de 100
países y regiones, incluidos
Europa y Estados Unidos

* Propuesto y desarrollado con la
participación de expertos de BMC



Flujo max.
Hasta 90L/M



Doble protección
Función de autocomprobación
del dispositivo & filtros
bacterianos delanteros y traseros



8 pulgadas
Pantalla táctil HD,
interacción amigable entre
humanos y computadoras



Índice ROX
Cálculo automático,
visualización en tiempo real



64 camas
Admite la supervisión & gestión
centralizada de datos
de hasta 64 camas



**Conectores de oxígeno
de alta presión & baja presión**
Se puede aplicar a recursos de
oxígeno de alta presión / baja presión



HFNC automático



Bilevel HFNC



Diseño práctico y orientado a las personas



Pantalla HD de 8 pulgadas

El estado operativo del equipo como índice ROX,
concentración de oxígeno, flujo, temperatura, etc., se puede ver de un vistazo



Control dual de pantalla táctil y botón

Admite la operación táctil de la pantalla y la
operación del botón independiente al mismo tiempo





Configuración de la función de recordatorio

La duración del tratamiento se puede establecer y
recordará cuando termine el tratamiento




Función de noche libre

Con la configuración de apagado de pantalla, el brillo
de la pantalla se puede ajustar para reducir el impacto
en el descanso nocturno de los pacientes

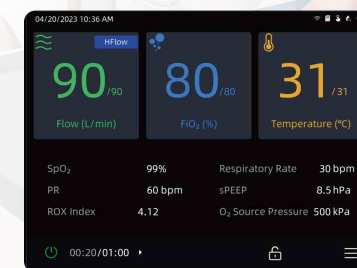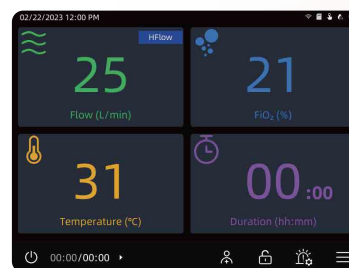

Conocimiento de las necesidades, seguro y práctico

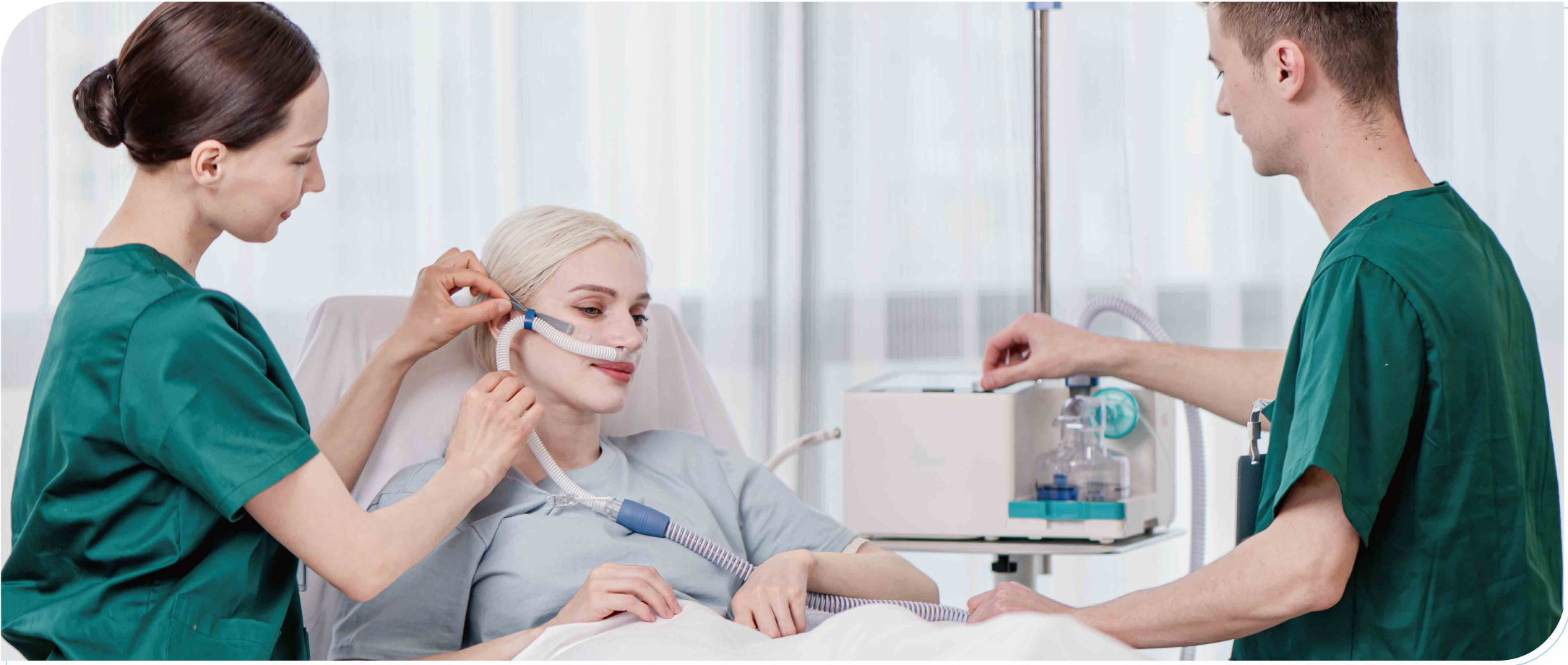

• Conectores de fuente de oxígeno alta y baja

Aplicables a una variedad de condiciones de fuente de oxígeno, se pueden conectar a fuentes de oxígeno de alta o baja presión



• Plan de tratamiento preestablecido

Se puede preestablecer una variedad de opciones de tratamiento para comenzar rápidamente el tratamiento



• Función de gestión de registros de terapia del paciente

Distinguir diferentes pacientes y ver gráficos de tendencias de datos relacionados con el tratamiento

Seguro

Los filtros delantero y trasero proporcionan doble protección




Práctico

Índice ROX-Se puede mostrar en tiempo real trabajando junto con un módulo opcional de SpO2, para identificar rápidamente el efecto de la terapia de alto flujo y predecir el riesgo de fracaso del tratamiento


AutoFlow

Flujo automático de alto rendimiento que ajusta automáticamente el flujo según el esfuerzo de inhalación del paciente, garantizando un efecto terapéutico óptimo, afrontando con facilidad situaciones de emergencia y gestionando el tratamiento de manera eficiente

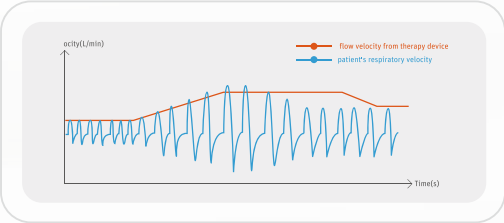


SmartFlow

Flujo dual de alto rendimiento que alterna el flujo entre inhalación y exhalación, ofreciendo un mayor flujo durante la inhalación y uno menor durante la exhalación. Esto garantiza la eficacia y el confort para los pacientes, al mismo tiempo que reduce la hiperventilación y optimiza el uso de recursos de oxígeno

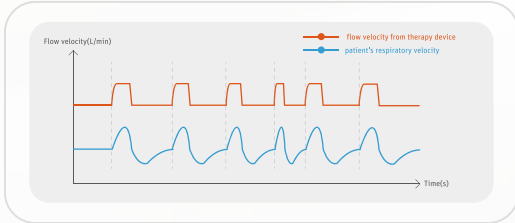



Sistema Centralizado de Gestión de Datos

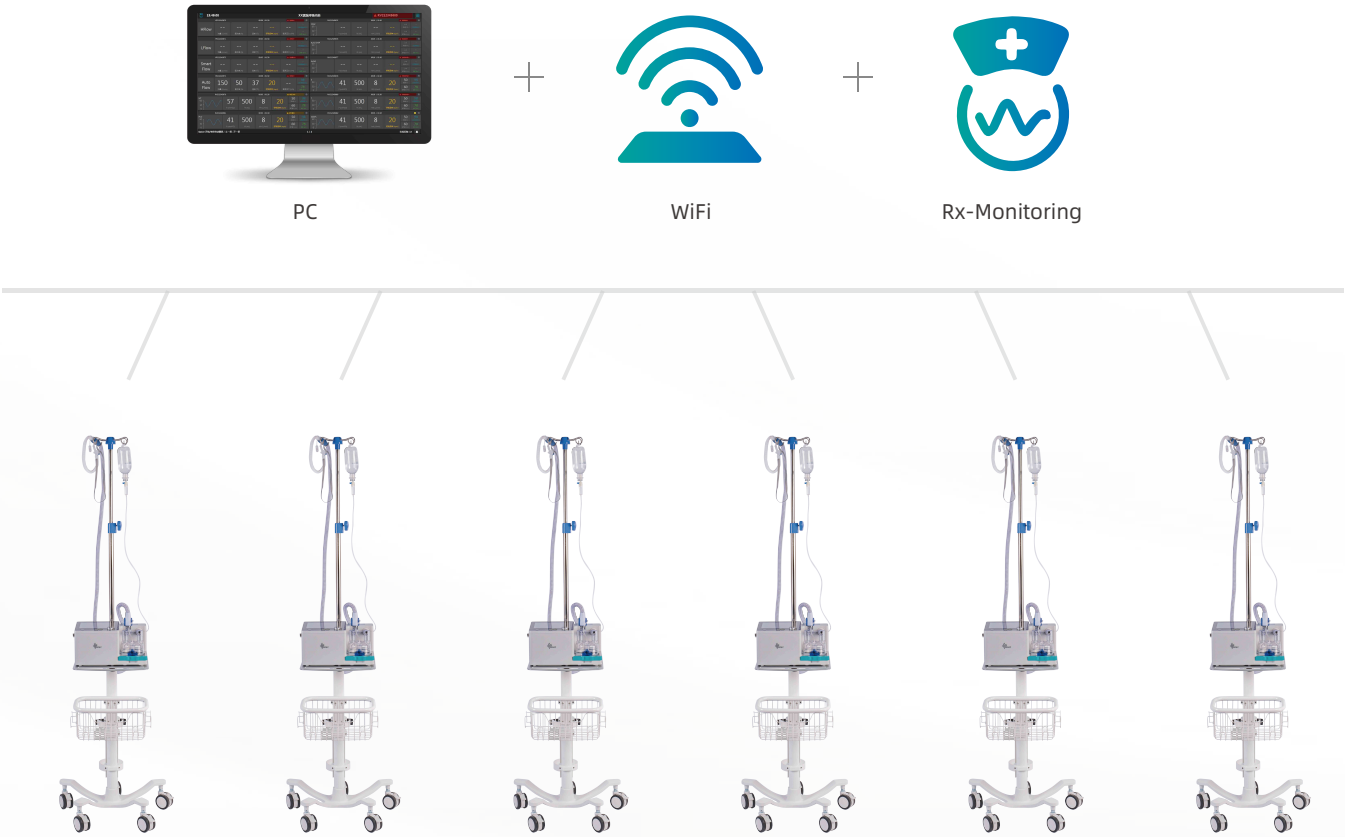

HT Series Respiratory High-Flow Therapy Device

Equipado con módulo WiFi y sistema opcional de Monitoreo Rx, se puede realizar la transmisión inalámbrica de datos entre múltiples dispositivos, la estación de enfermería y la administración centralizada de múltiples camas

Especificación del producto

	HT80FM2	HT80FU2	HT90FU2	HT80SU2	HT90SU2
Concentración de Oxígeno ajustable	Manual	Auto & Manual	Auto & Manual	Auto & Manual	Auto & Manual
Fuente de O ₂ de Alta Presión	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Fuente de O ₂ de Baja Presión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Flujo Máximo	80	80	90	80	90
AutoFlow	-	-	-	Yes	Yes
SmartFlow	-	-	-	Yes	Yes
Etapas de Temperatura	9 etapas	9 etapas	9 etapas	9 etapas	9 etapas
Compensación de Humedad	7 niveles	7 niveles	7 niveles	7 niveles	7 niveles
sPEEP	Monitoreable	Monitorable	Monitorable	Monitorable	Monitorable
Frecuencia Respiratoria	Monitorable	Monitorable	Monitorable	Monitorable	Monitorable
Tamaño de Pantalla	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas	8 pulgadas
Revisión de Tendencias	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión de pacientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Preseteo del tiempo de terapia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SpO ₂	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Tasa de Pulso	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Índice ROX	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de Monitoreo Rx	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Adaptador de Cámara de Agua Multifuncional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional